


BT-CSIS

Tube Feeding Training Model

USER'S GUIDE

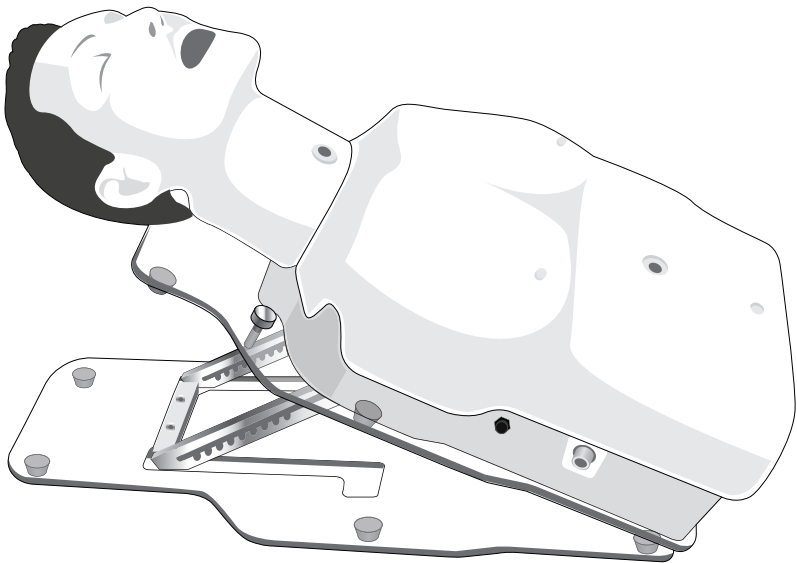

■ Product Information

Product Name	Tube Feeding Training Model
Model Name	BT-CSIS
Manufacturer	BT Inc.
Country of Origin	South Korea

■ Product Specifications

Size	310 x 700 x 238 mm
Weight	9kg

■ Customer Service

Web-site	www.btinc.co.kr
Address	Headquarter : A-313 Samsong Techno-valley, 140, Tongil-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10594, South Korea
Contacts	Sales : Busan Building 5F, 27, Jeonpo-daero 92beon-gil, Nam-gu, Busan 48404, South Korea
E-mail	Headquarter : +82-2-2038-2903 Sales : +82-51-903-1144 bt@btinc.co.kr



I Cautions

Please read it carefully to ensure correct usage and user's safety through understanding of the product.

- ① Use only components provided or approved by BT Inc.
- ② Do not use the product for other purposes described in the manual.
- ③ If you disassemble or modify the product without any permission by BT Inc, you cannot get the warranty. Also, making imitated or altered products for commercial purposes are prohibited by law.
- ④ Keep the product away from water and moisture.
- ⑤ Do not keep the product near hot or cold environments as possible. Deterioration of product or internal damage may occur by the extreme weather conditions
- ⑥ Never clean the product with chemicals such as solvent, benzene or thinner as these may cause fire ignition or the surface deterioration.
- ⑦ BT Inc. can change or adjust the product specification without any notice in order to improve the product.

Components

Adult torso model

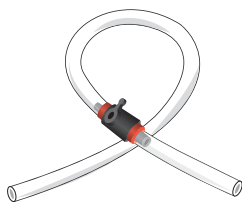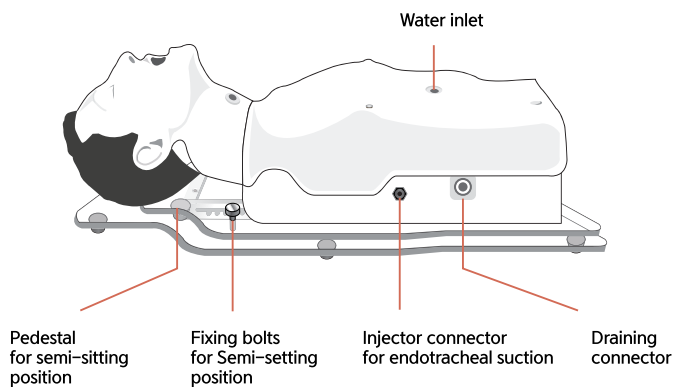

Draining tube



Funnel





Injector for endotracheal suction





Inner stopper for stomach

* Etc. – Storage bag, User manual



Installation

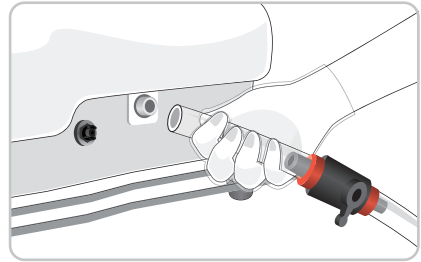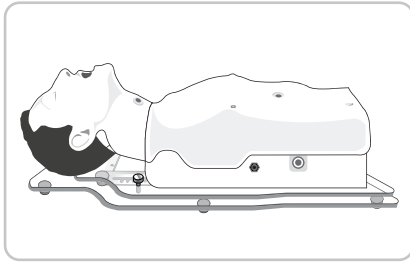

Put the manikin in a supine position, lock the valve of the draining tube and insert it into the draining connector of manikin.

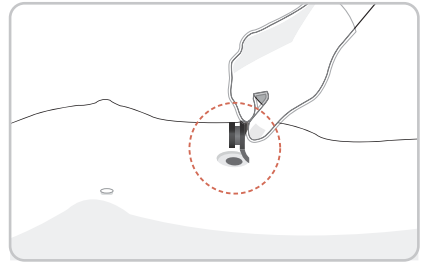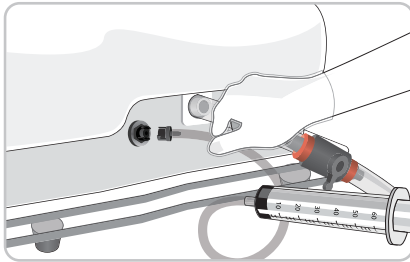

Insert the injector for endotracheal suction to the connector and open the valve of water inlet on the abdomen.

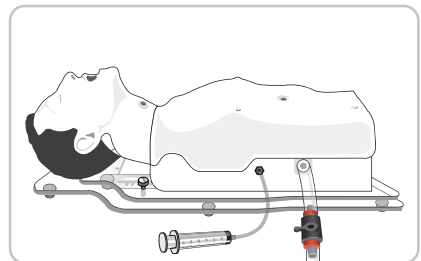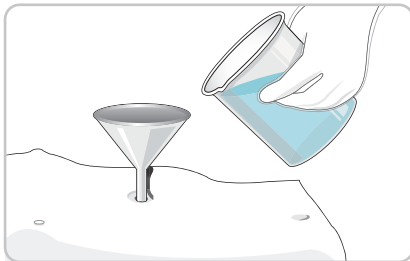


Remove the inner stopper inside the stomach, fill about 300cc ~ 350cc of water by using a funnel. After that, insert the inner stopper in the stomach part and close the outer cover.


※ When install the tube feeding training model,
be sure to lock the valve of draining tube before injecting water.

Installation


<Changing position>

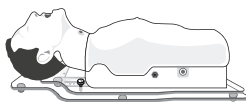

Supine position


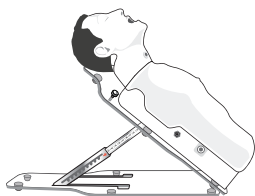


Semi-sitting position (21°~45°)

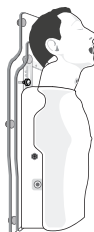


Sitting position

<How to change the Semi-sitting position>

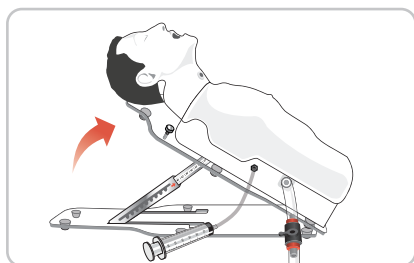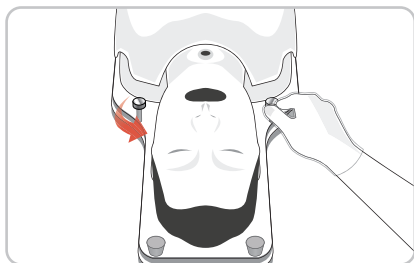


Loosen and remove bolts at the top, adjust the pedestal to the angle.

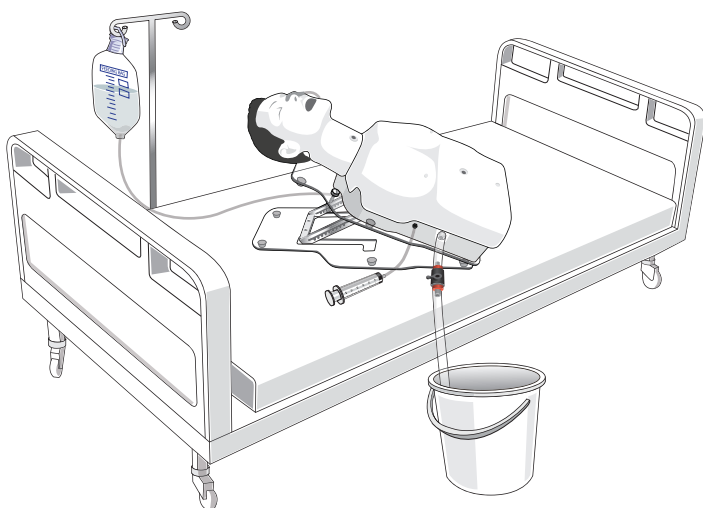


Functions

<Tube feeding>

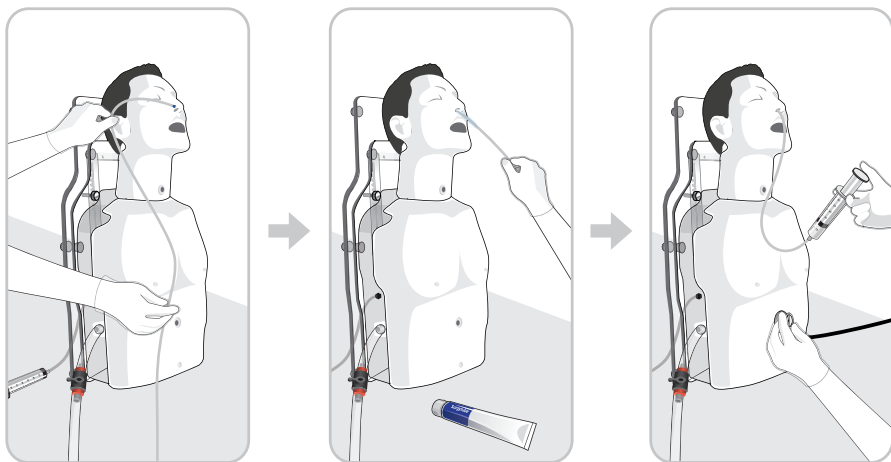

When practicing tube feeding, set the manikin to sitting or semi-sitting position and practice according to the way of inserting the catheter.

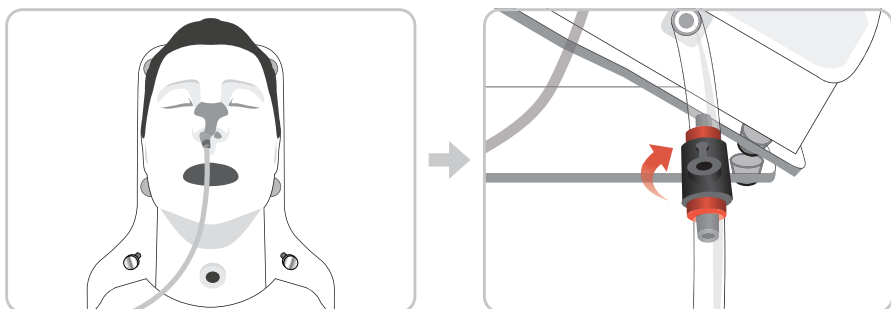


When injecting nutrition after inserting a catheter, inject nutrition after open the valve of darining tube.

※ When practicing tube feeding, be sure to open the valve of draining tube.

Functions


<Tracheostomy care / Endotracheal suction>

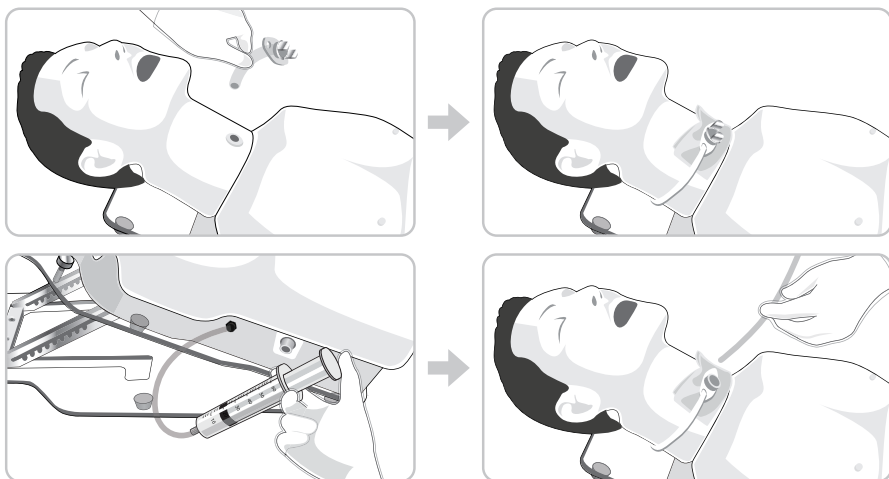

Practicing tracheostomy care is possible.


Please do the training after injecting artificial saliva of 20~30cc with a injector for endotracheal suction.

<Gastrostomy tube / PEG care>

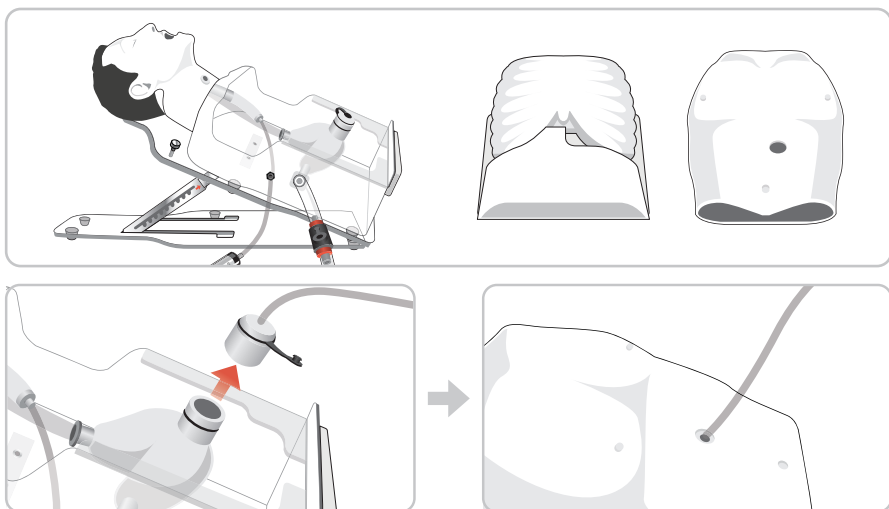


When practicing gastrostomy tube care or PEG care, remove the chest skin and rib part of manikin, insert a gastrostomy tube by opening the cap of stomach, seal the skin and proceed the training.


Maintenance

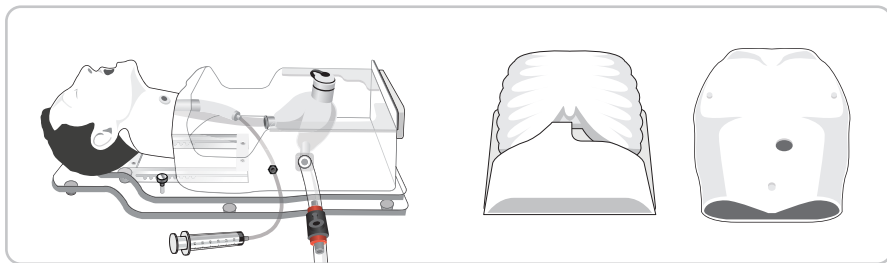

After training, put the manikin in a lateral position, drain the remaining nutrition fluid and remove the chest skin and rib part of manikin.

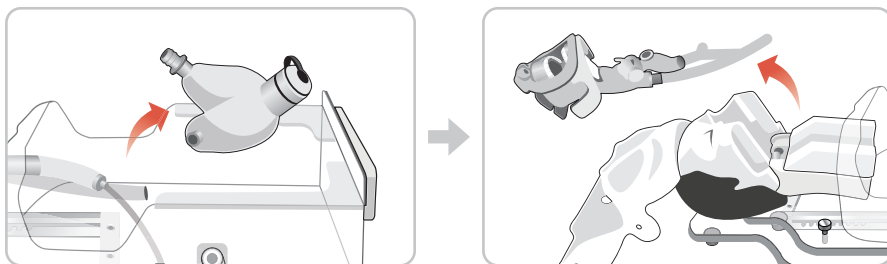

Separate the stomach, remove the face skin, and then separate the trachea.

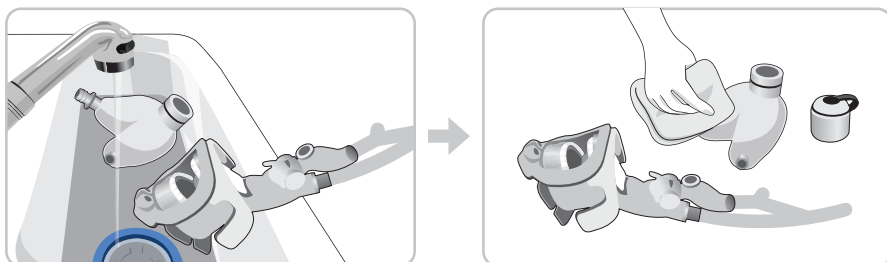

Wash models in running water, wipe the surface with a dry cloth and dry it. After drying, assemble and store in reverse order.

■ 품질보증서

제 품 명	위관영양 훈련모형	모 델 명	BT-CSIS
고 객 명		연 락 처	
주 소			
구 입 처		구 입 일	년 월 일

※ 이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

품질보증기간	제품 구입일로부터 1년 이내
--------	-----------------

이 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사에 합격한 제품입니다. 구매자가 제품을 구입한 날로부터 1년간 제품의 결함이 없음을 보증합니다. 단, 소모품은 제외합니다. 제품의 품질보증을 위해서는 보증기간 확인을 위해 구입처 및 구입일이 명시된 보증서 또는 영수증 사본을 동봉하여야 합니다. 위의 문서를 동봉하지 않았거나, 문서의 판독이 어려운 경우 무상서비스가 제한 될 수 있습니다. 또한 아래와 같은 경우 서비스가 제한 되거나 보증기간 중일지라도 유상 서비스로 진행 될 수 있습니다.

제품 고장이 아닌 경우	사용설명서 미숙지로 인한 서비스 접수시
	소비자의 고의 또는 과실로 제품의 부품 및 외관을 훼손한 경우
소비자 과실로 고장난 경우	제품에 붙어 있는 스티커, 라벨이 손상된 경우 및 외관이 파손되어 있는 경우
	외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상시
	임의로 분해 등 사용자의 부주의 및 과실로 손상된 경우
	사용설명서 내의 주의 사항을 지키지 않아 발생한 고장
그 밖의 경우	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 수해 등)에 의한 고장 발생시
	정식 유통과정을 거치지 않고 구입한 경우

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 왕복 운송비 등의 요금을 청구할 수 있습니다.

※ 운반 도중 분실, 훼손, 지연 등의 분쟁처리는 배송회사의 약관을 따르고, 운반 도중의 사고에 대해 판매업체는 책임을 지지 않습니다.

BT-CSIS

Tube Feeding Training Model

A-313, Samsung Techno-valley, 140, Tongil-ro,
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10594, Republic of Korea
Homepage: www.btinc.co.kr / E-mail: bt@btinc.co.kr
Tel: +82-2-2038-2903, +82-51-903-1144 / Fax: +82 303-3130-0607

Copyright(c) BT Inc. All rights reserved.